


# Klinik für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie Rummelsberg / Nürnberg

## Anleitung zur intraoperativen Pedographie

### Aufbau des Systems

1. Tisch („stumme“ Schwester) bereitstellen
2. Koffer öffnen
3. Laptop entnehmen und anschalten
4. Netzkabel an PC und Steckdose anschließen
5. Blauen Stick (HL 3911 Novel) bei Markierung einstecken
6. Roten Bluetooth-Stick bei Markierung einstecken
7. Maus auf Gegenseite einstecken

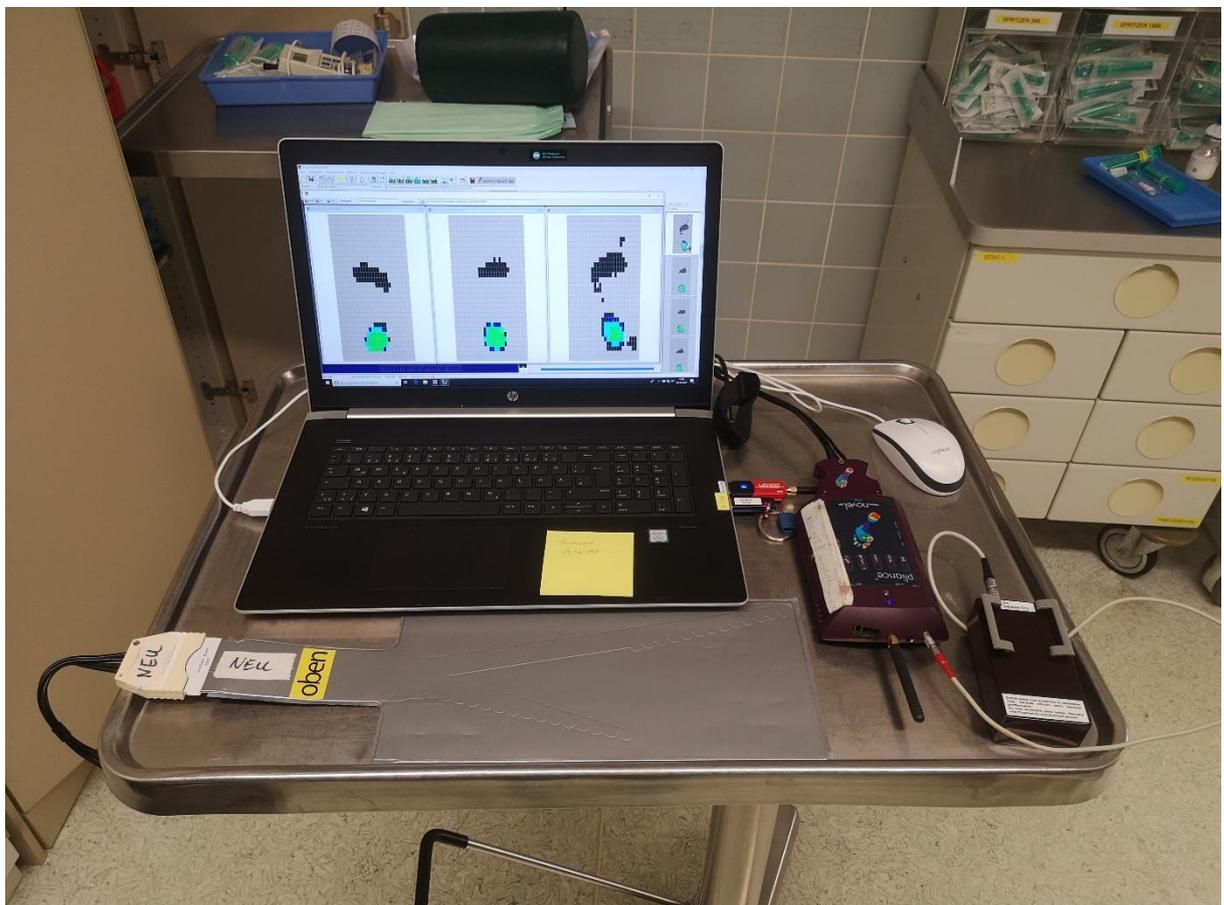



## Aufbau des Meßsystems

1. KIOP-Matte VORSICHTIG aus Mappe entnehmen



2. pliance Sender (rotes Kästchen mit Antenne) mit Akku verbinden (roter Stich bzw. Punkt für Einsteckrichtung!!).
3. pliance Sender einschalten



4. Ladezustand des Akkus überprüfen (schwarzen Kopf drücken) – Voller Akku = alle 4 Lämpchen leuchten



5. Novel Sender mit Messmattenkabel und Matte verbinden  
Version Matte NEU



Version Matte BLAU



## Start Computerprogramm

1. Login Windows: fuss 80
2. Programm NOVEL öffnen
3. Neuer Patient
4. Vorname, Name, Geburtsdatum und Geschlecht eingeben
5. Patientenummer generieren

**Patienten**

Patient mobile phone, e-mail

Patienten ID

Vorname

Vorname

01.01.1900

Geburtsdatum

Externe ID

Nachname

Nachname

männlich

Geschlecht

6. „Neuer Besuch“ auswählen

Nachname

Nachname

männlich

Geschlecht

Hausnr.

Wohnungsnr.

Land

Beruf

1380 Anzahl der Besuche 0

+ Neuer Besuch


7. „prä\_post“ auswählen („vorher“ eingeben)

The screenshot shows a medical form with a tabbed interface. The tabs are labeled "e Daten (II)", "SMS,e-mail", "Experte", and "Zusätzliche Information". The "Zusätzliche Information" tab is active. A text input field contains the word "vorher" and is highlighted with a red circle. Below it, the text "prä\_post" is visible. The form includes fields for "(kg/m<sup>2</sup>)", "Schuhgröße", and "(cm)". A field for "Telefonnummer des Arztes" is also present. On the right side, there is a vertical toolbar with icons for a person, a book, a colorful icon, and a briefcase. At the bottom right, there are buttons for "editieren", "Bestätigen", and "Abbrechen".

8. Messprogramm auswählen


The screenshot shows the same medical form as in the previous image. The "Zusätzliche Information" tab is still active. The text input field now contains "prä\_post". On the right side, the vertical toolbar has a red circle around the colorful icon, indicating it is the selected measurement program. The other elements of the form, including the tabs, input fields, and buttons, remain the same.

## 9. Messprogramm starten

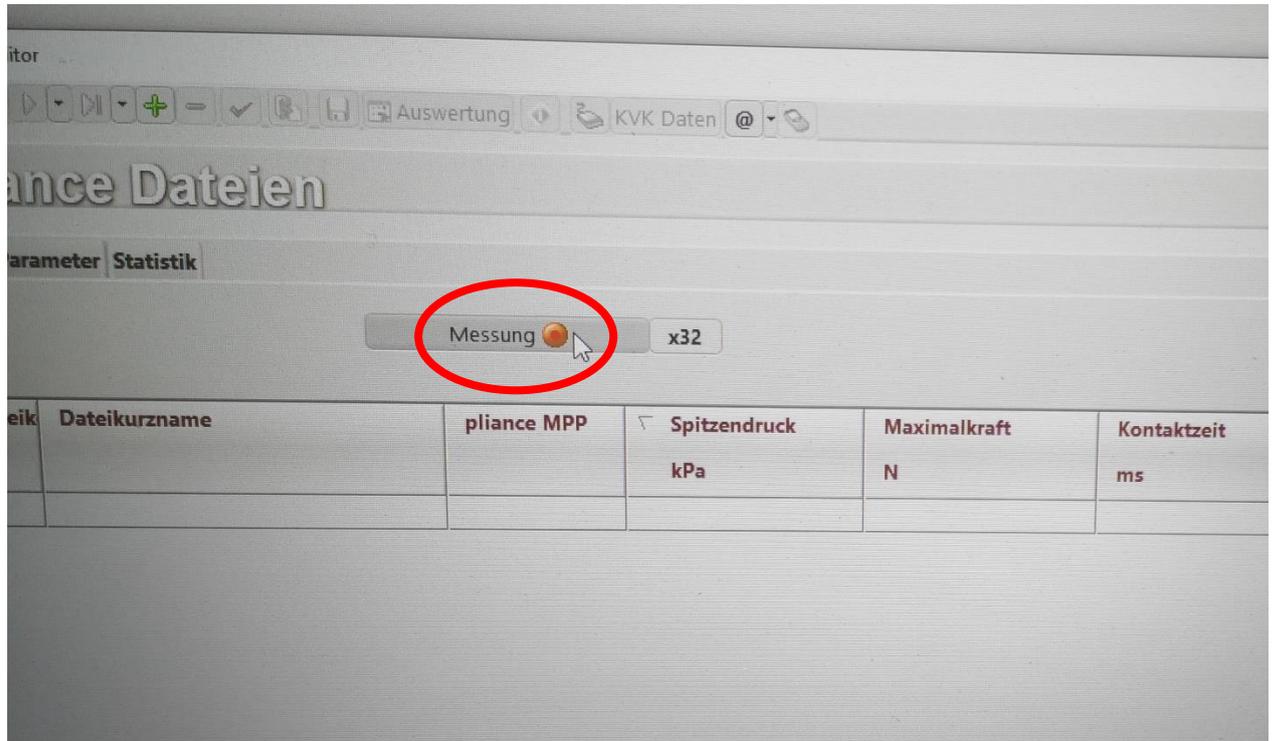

## Messung

1. Mattenkonfigurations auswählen und „Bestätigen“ drücken

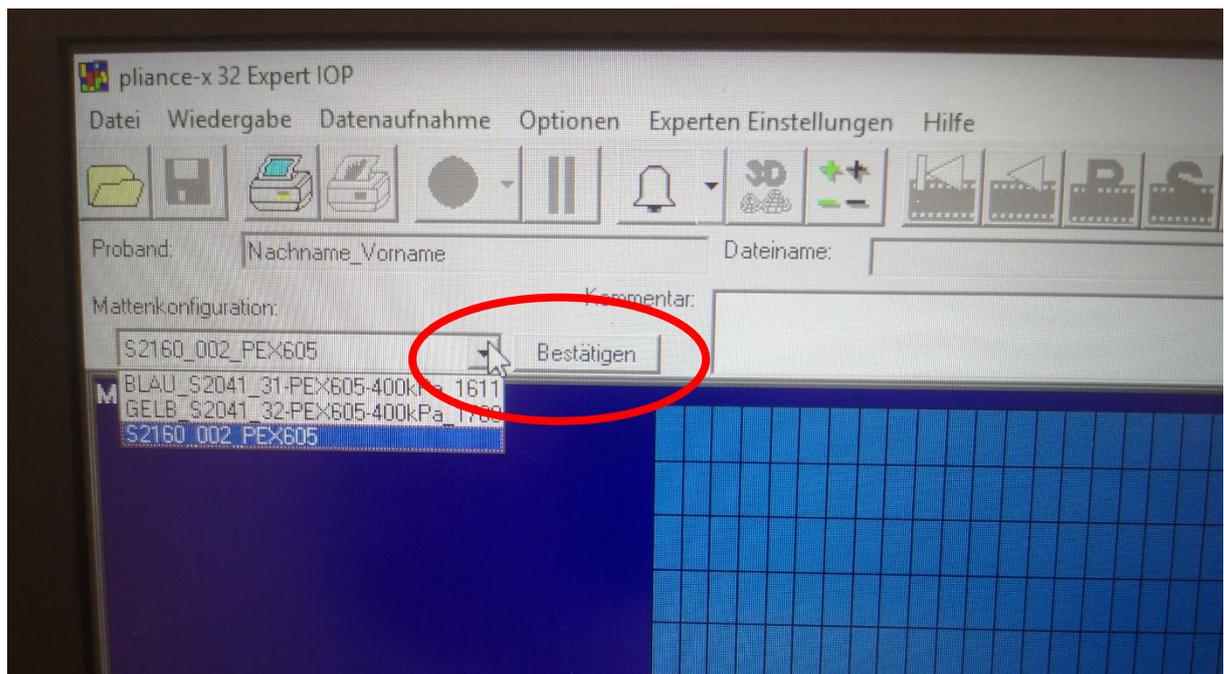

2. Messung nach Maßgabe des Operateurs